

FISIOGRAFT

GEL - POLVERE - SPUGNA

Biomateriale di sintesi, utilizzato nella chirurgia dentale e maxillo-facciale per il **riempimento di cavità ossee** naturali o patologiche a base acido polilattico e acido poliglicolico (PLGA).

PLGA acido polilattico e acido poliglicolico
Completamente riassorbibile in 4-6 mesi



G Ghimas
D E N T A L


FISIOGRAFT^{GEL}



Completamente riassorbibile in **4-6 MESI**

Forma fisica:
gel scaffold


- Composizione: PLGA 20% (100mg) + PEG 80% (400mg)
- Confezione: 1 siringa 500mg (Cod. prodotto: PFOF0036)
- Confezione: 5 siringhe da 500mg (Cod. prodotto: PFOF0035)
- Dispositivo Medico CLASSE III
- Certificato CE0426, ISO9001, ISO13485, **HALAL**
- Siringa senza ago con tappo sigillato, **READY TO USE**

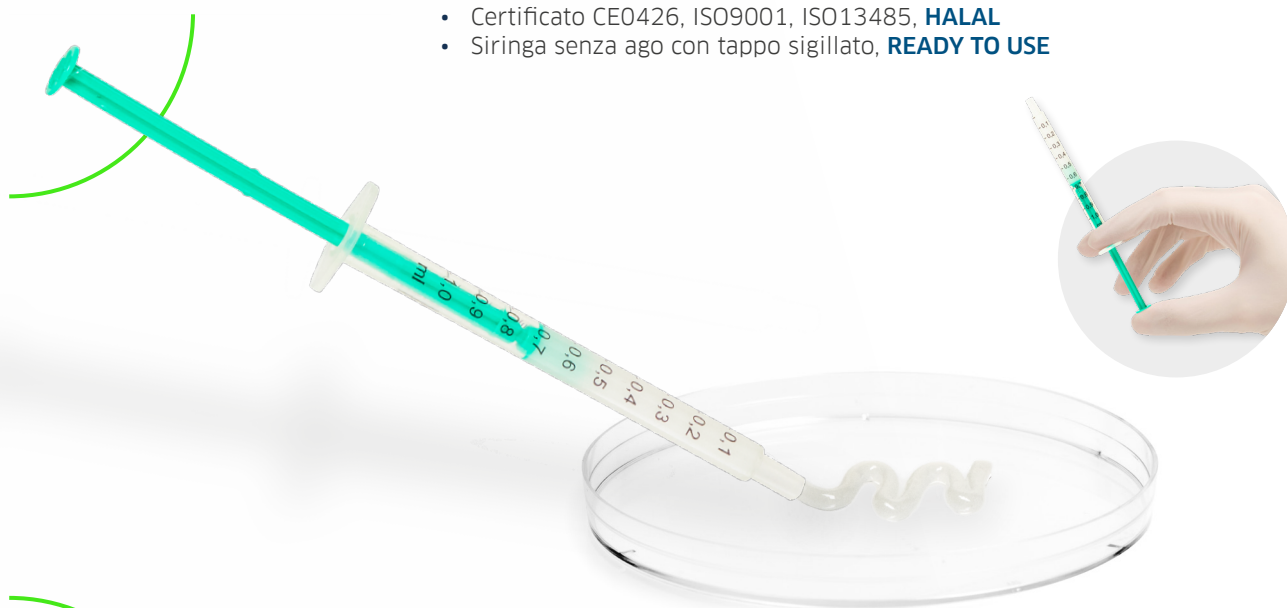


PLGA Gel

PLGA Gel

Struttura porosa trabecolare accessibile alla parte corpuscolata del sangue e GFs.

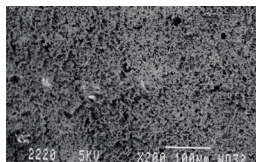


SEM Ingrandimento PLGA: 200X

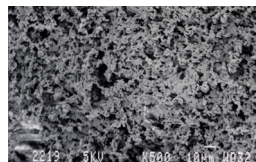


SEM Ingrandimento PLGA: 500X


L'esame istologico di una carota prelevata da un sito post-estrattivo impiantato con Fisiograft, dopo sei mesi, indica che: *"Il materiale viene completamente riassorbito e sostituito da tessuto osseo trabecolare ben mineralizzato, contenente midollo osseo e mostra tutte le caratteristiche di un normale osso alveolare".*

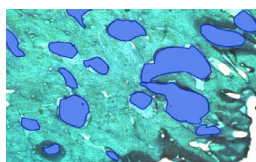

Osso neoformato con spazi midollari

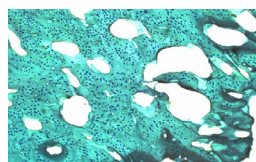

Osso neoformato con osteociti

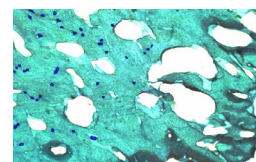

Osso neoformato con vasi sanguigni

FISIOGRAFT POLVERE



Completamente riassorbibile in **4-6 MESI**

Forma fisica:
polvere


- Composizione: PLGA 29% (145mg) + DESTRANO 71% (355mg)
- Confezione: 1 flaconcino, da 2 ml ca. (Cod. prodotto: PFOF0026)
- Confezione: 5 flaconcini, da 2 ml ca. (Cod. prodotto: PFOF0025)
- Dispositivo Medico CLASSE III
- Certificato CE0426, ISO9001, ISO13485, **HALAL**




PLGA
polvere
liofilizzata

PLGA polvere liofilizzata

- Crea un più ampio numero di canali di accesso al suo interno
- È più facilmente attraversabile da sangue
- Immediata formazione di un coagulo stabile sia all'interno sia all'esterno del materiale stesso

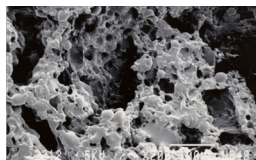


Fisiograft Polvere Ingrandimento: 200X

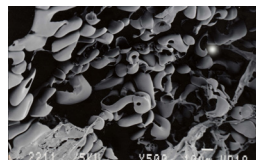


Fisiograft Polvere Ingrandimento: 500X


L'esame istologico di una carota prelevata da un sito post-estrattivo impiantato con Fisiograft, dopo sei mesi, indica che: *"Il materiale viene completamente riassorbito e sostituito da tessuto osseo trabecolare ben mineralizzato, contenente midollo osseo e mostra tutte le caratteristiche di un normale osso alveolare".*

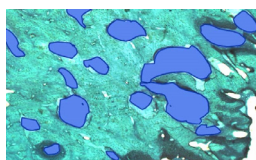

Osso neoformato con spazi midollari

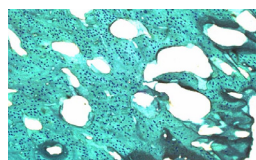

Osso neoformato con osteociti

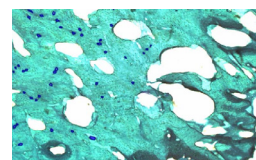

Osso neoformato con vasi sanguigni

FISIOGRAFT SPUGNA



Completamente riassorbibile in **4-6 MESI**

Forma fisica:
blocchetto


- Composizione: PLGA 29% (156mg) + PEG 71% (64mg)
- Fiala in vetro
- Confezione: 1 flacone 0,86 ml ca. (Cod. PFOF0016)
- Confezione: 5 flaconi da 0,86 ml ca. (Cod. PFOF0015)
- Dispositivo Medico CLASSE III
- Certificato CE0426, ISO9001, ISO13485, **HALAL**



PLGA
spugna
liofilizzata


PLGA spugna liofilizzata

- Crea un più ampio numero di canali di accesso al suo interno
- È più facilmente attraversabile da sangue
- Immediata formazione di un coagulo stabile sia all'interno sia all'esterno del materiale stesso

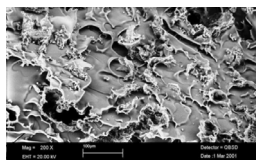


Lorem ipsum


L'esame istologico di una carota prelevata da un sito post-estrattivo impiantato con Fisiograft, dopo sei mesi, indica che: *"Il materiale viene completamente riassorbito e sostituito da tessuto osseo trabecolare ben mineralizzato, contenente midollo osseo e mostra tutte le caratteristiche di un normale osso alveolare".*

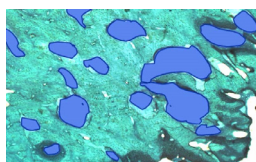

Osso neoformato con spazi midollari

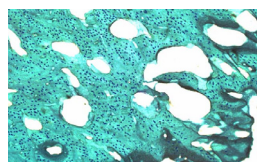

Osso neoformato con osteociti

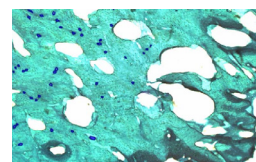

Osso neoformato con vasi sanguigni

FISIOGRAFT
è il biomateriale
più riassorbibile
e osteoconduttivo

“Biomateriali utilizzati in rigenerazione ossea: risultati istologici”


FISIOGRAFT è risultato il biomateriale più riassorbibile e osteoconduttivo dopo 6-8 mesi dall'innesto.

	osso neoformato	spazi midollari	materiale residuo
BIOCORAL	42%	40%	18%
OSSO BOVINO	39%	34%	27%
BIOVETRI	40%	43%	17%
DFDBA	29%	37%	34%
FISIOGRAFT	43%	56%	1%
IDROSSIAPATITE	41%	30%	31%
OSSO AUTOLOGO	42%	40%	18%
PEP-GEN P-15	40%	37%	23%
SOLFATO DI CALCIO	48%	39%	13%


Piattelli A. Implantologia-Orale. 2003; 4: 77-80

Completa neogenesi ossea

I risultati istologici confermano per FISIOGRAFT la caratteristica di “**mantenitore di spazio ideale**”. La sua erosione centripeta e progressiva, fino alla sua totale degradazione, permette, infatti, la rigenerazione del tessuto osseo senza interferire con i processi fisiologici di riparazione.

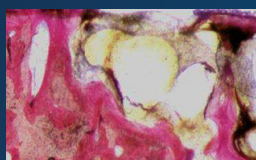

Osso autologo

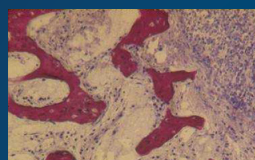

FISIOGRAFT



Osso bovino

Si può controllare radiologicamente la formazione di osso neoformato

Fisiograft **NON È RADIOPACO** e permette di controllare radiologicamente la neoformazione ossea.



Applicazioni d'uso




Grande rialzo del seno
mascellare
FISIOGRAFT GEL
FISIOGRAFT POLVERE + GEL
FISIOGRAFT SPUGNA



Mantenimento
volume
FISIOGRAFT SPUGNA
FISIOGRAFT POLVERE
FISIOGRAFT POLVERE + GEL



Split crest
FISIOGRAFT POLVERE
FISIOGRAFT POLVERE + GEL
FISIOGRAFT SPUGNA

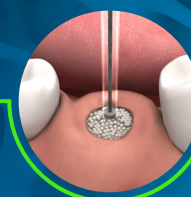

Post estrattivo
FISIOGRAFT SPUGNA
FISIOGRAFT POLVERE + GEL

I VANTAGGI di FISIOGRAFT

GEL

- ✓ Totalmente riassorbito entro **4 - 6 MESI**
- ✓ Completamente sostituito da **OSSO NEOFORMATO MINERALIZZATO CELLULARE**
- ✓ **PRIVO DI RISCHI CROCIATI**: BSE - HIV - HBV - SARS
- ✓ **NON RADIO-OPACO**
- ✓ **ELEVATA BIOCOMPATIBILITÀ**
- ✓ **ADERISCE CON FACILITÀ** alle pareti irregolari delle cavità

POLVERE

- ✓ Totalmente riassorbito entro **4 - 6 MESI**
Il peso molecolare xxx, consente una rapida degradazione biologica
- ✓ **COMPLETAMENTE SOSTITUITO** da osso neoformato mineralizzato cellulare
- ✓ **PRIVO DI RISCHI CROCIATI**: BSE - HIV - HBV - SARS
- ✓ **NON RADIO-OPACO**
- ✓ **ELEVATA BIOCOMPATIBILITÀ**
- ✓ **OCCUPA COMPLETAMENTE** cavità irregolari

SPUGNA

- ✓ Totalmente riassorbito entro **4 - 6 MESI**
Consente una rapida degradazione biologica
- ✓ **COMPLETAMENTE SOSTITUITO** da osso neoformato mineralizzato cellulare
- ✓ **PRIVO DI RISCHI CROCIATI**: BSE - HIV - HBV - SARS
- ✓ **NON RADIO-OPACO**
- ✓ **ELEVATA BIOCOMPATIBILITÀ**
- ✓ La spugna se idratata con **FISIOGRAFT GEL**, soluzione fisiologica o sangue, può essere collocata, senza compattare, nel sito ricevente
- ✓ Fisiograft Spugna, inserito in alveoli postestrattivi, **RIDUCE IL RIASSORBIMENTO DELLA CRESTA ALVEOLARE**

PIÙ DI 100 PUBBLICAZIONI

BIBLIOGRAFIA

- 1 - Bone regeneration strategies: Engineered scaffolds, bioactive molecules and stem cells current stage and future perspectives. Antalya Ho-Shui-Ling et al., Biomaterials Volume 180, October 2018, Pages 143-162.
- 2 - Poly(Lactic-co-Glycolic Acid): Applications and Future Prospects for Periodontal Tissue Regeneration Xiaoyu Sun, Chun Xu, Gang Wu, Qingsong Ye and Changning Wang. Academic Editor: Patrick van Rijn Received: 11 April 2017; Accepted: 11 May 2017; Published: 1 June 2017.
- 3 - Stem cells, growth factors and scaffolds in craniofacial regenerative medicine. Viktor Tollema et al. Genes & Diseases Volume 3, Issue 1, March 2016, Pages 56-71.
- 4 - Effects of lactic acid and glycolic acid on human osteoblasts: a way to understand PLGA involvement in PLGA/calcium phosphate composite failure. Florent Meyer, John Wardale, Serena Best, Ruth Cameron, Neil Rushton, Roger Brooks failure 2012 Jun;30(6):864-71.
- 5 - Valutazione dell'uso di un biomateriale nel trattamento dei difetti parodontali infraossei. Briguglio F, Isola G, Lapi M, Briguglio R, Briguglio E. Italian Oral Surgery 2009; 8 (5): 247-55.
- 6 - Alveolar bone dimensional changes of post-extraction sockets in humans: a systematic review. Van der Weijden F, Dell'Acqua F, Slot DE. J Clin Periodontol 2009; 36: 1048-1058.
- 7 - Polylactide/polyglycolide copolymer in bone defect healing in humans. Bertoldi C, Zaffe D, Consolo U. Biomaterials 2008; 29: 1817-23.
- 8 - Maxillary sinus augmentation with different biomaterials: a comparative histologic and histomorphometric study in man. Scarano A, Degidi M, Iezzi G, Pecora G, Piattelli M, Orsini G, Caputi S, Perrotti V, Mangano C, Piattelli A. Implant Dent. 2006; 15 (2): 197-207.
- 9 - Histological study on sinus lift grafting by Fisiograft and Bio-Oss. Zaffe D, Leghissa GC, Pradelli J, Botticelli AR. J Mater Sci: Mater Med 2005; 16: 789-93.
- 10 - Guided Tissue Regeneration with a Synthetic Co-polymer of Polyglycolic and Polylactic Acid (Fisiograft® gel) in Fenestrations and/or Dehiscences Defects Around Implants: A Clinical Controlled Study at 1 Year. Rocchietta I, Pilloni A, Rasperini G, Simion M. Poster Presentation Abstracts the 19th Annual meeting of the Academy of Osseointegration 03/2004; P118.
- 11 - Ridge preservation following tooth extraction using a polylactide and polyglycolide sponge as space filler: a clinical and histological study in man. Serino G, Biancu S, Iezzi G, Piattelli A. Clin Oral Impl. Res. 2003; 14: 651-58.
- 12 - Use of PLA-PGA as a bone filler: clinical experience and histologic study of a case. Stancari F, Zanni B, Bernardi F, Calandriello M, Salvatorelli G. Quintessenz (Germany) 2000; 51

